



Antes de executar as etapas de configuração, verificar se o alias RPSANALISE já existe no BDE, seguindo os passos abaixo:

1. Acessar Painel de Controle e executar o arquivo BDE Administrator;

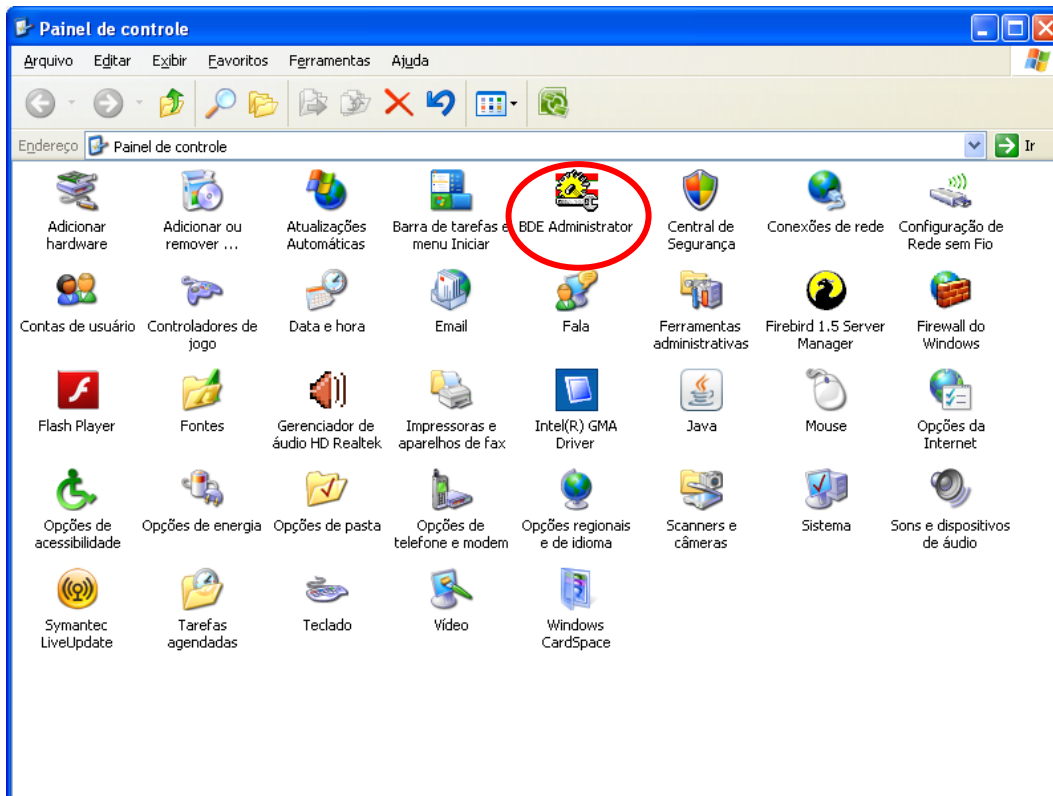

2. Localizar o alias RPSANALISE e verificar se está configurado conforme abaixo:

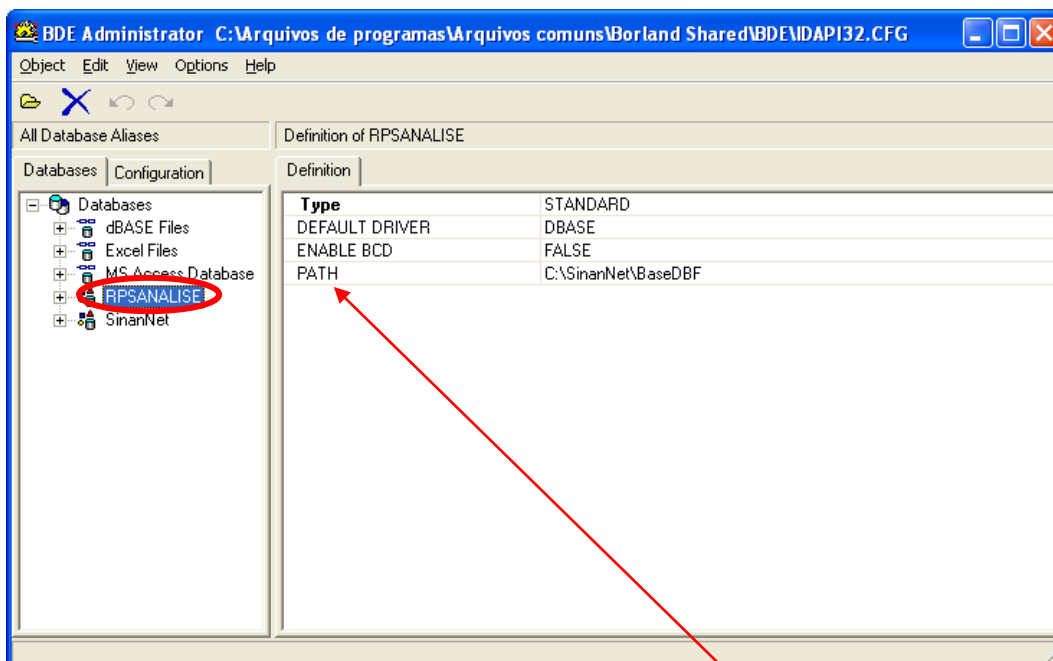


3. Caso no alias do RPSANALISE, aparecer a definição de PATH C:\Sinanw\Tabwin, alterar esta definição para C:\SinanNet\BaseDBF , conforme imagem acima;
4. Caso o alias RPSANALISE não apareça, seguir as orientações a seguir sobre a **Configuração do BDE para carregar os arquivos SQL no Exportador (Relatório de Conferência) do SinanNet;**


Configuração do BDE para carregar os arquivos SQL no Exportador (Relatório de Conferência) do SinanNet

Para que a configuração seja realizada com sucesso, é necessário que o usuário que irá executar essa operação tenha o perfil de administrador da máquina ou da rede.


1. Clicar com o botão direito em Databases e seleciona a opção NEW;

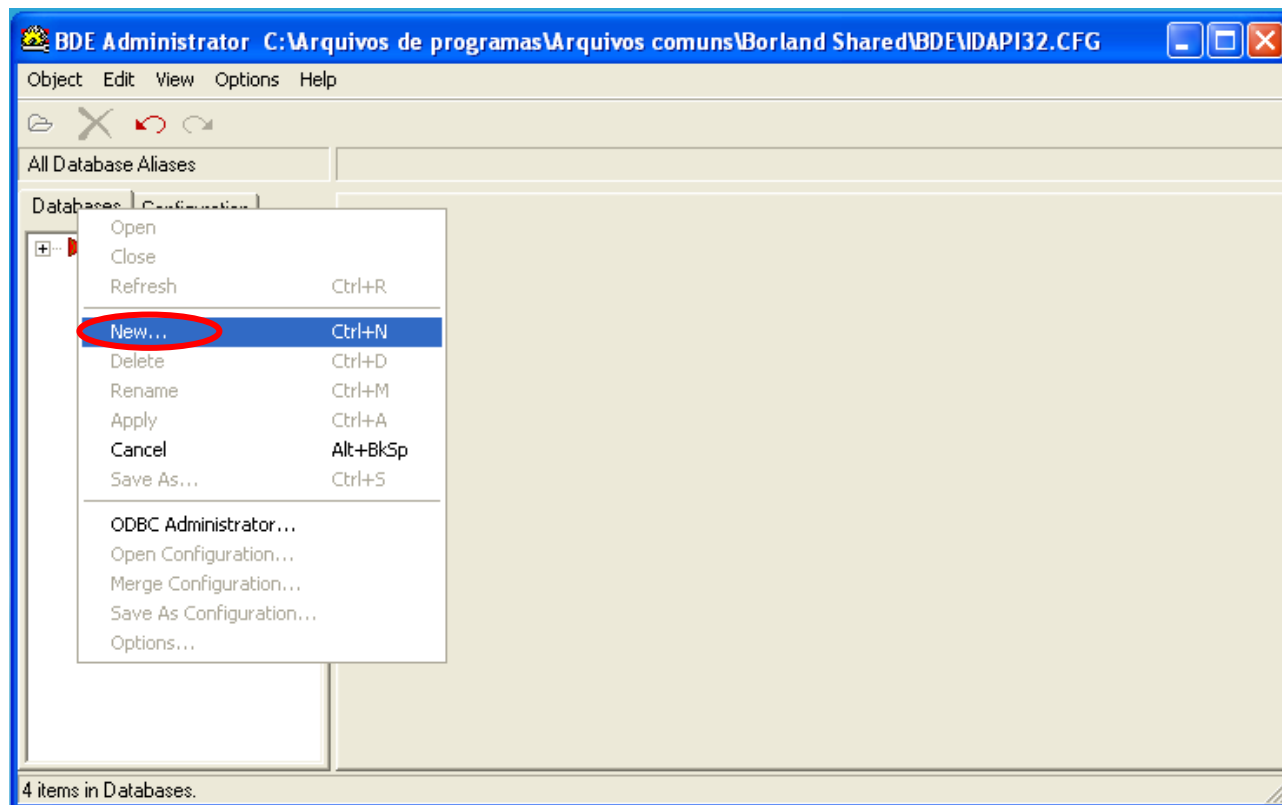


2. Clicar no botão OK;

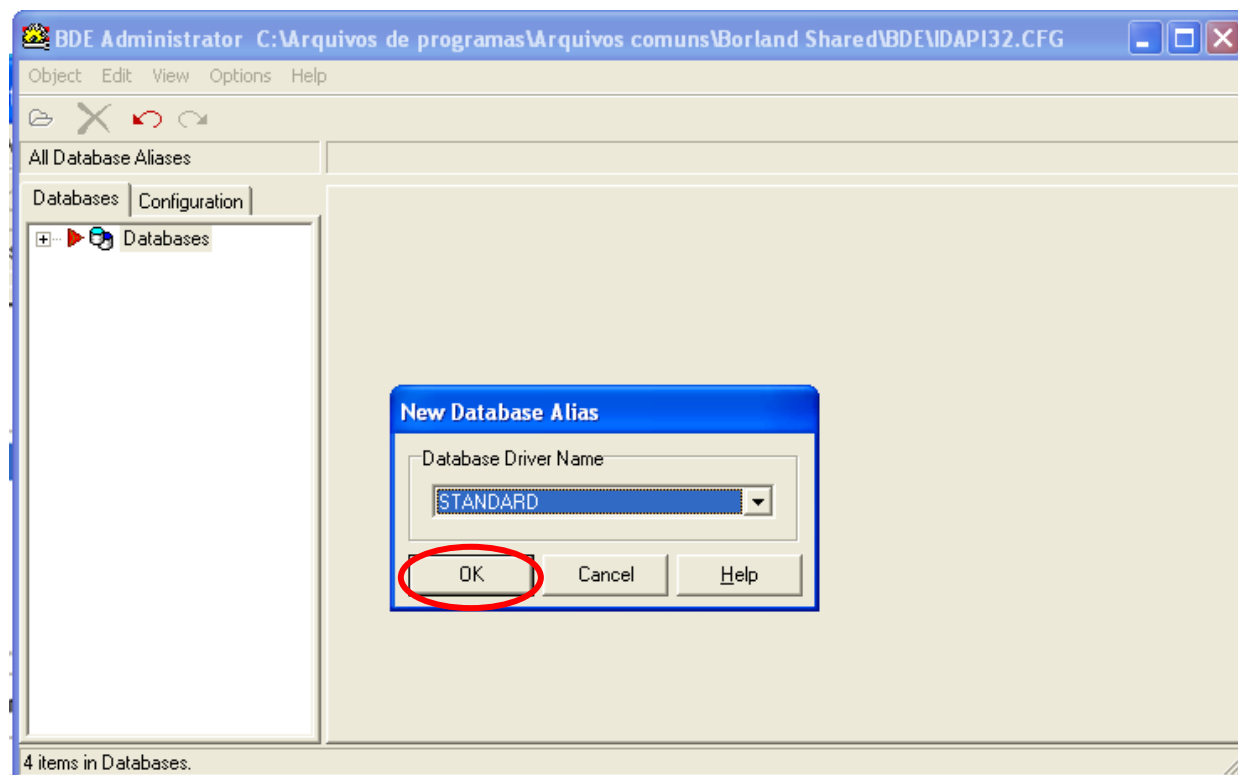


3. Clica no botão direito no nome STANDARD1 e clicar na opção RENAME para renomear o alias;
4. Renomear o alias STANDARD1 para RPSANALISE e teclar ENTER;

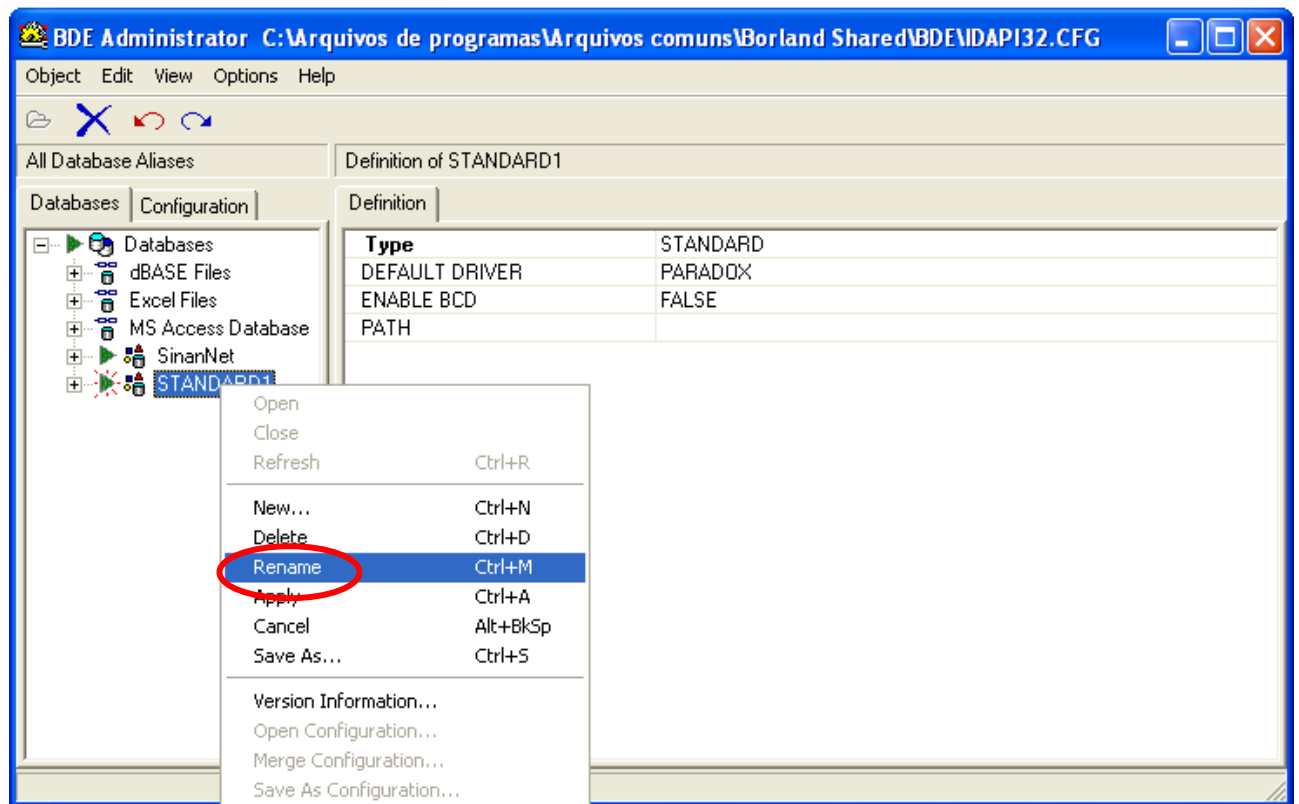

5. No lado direito da janela, clicar na seta para baixo em DEFAULT DRIVER e selecionar a opção DBASE;

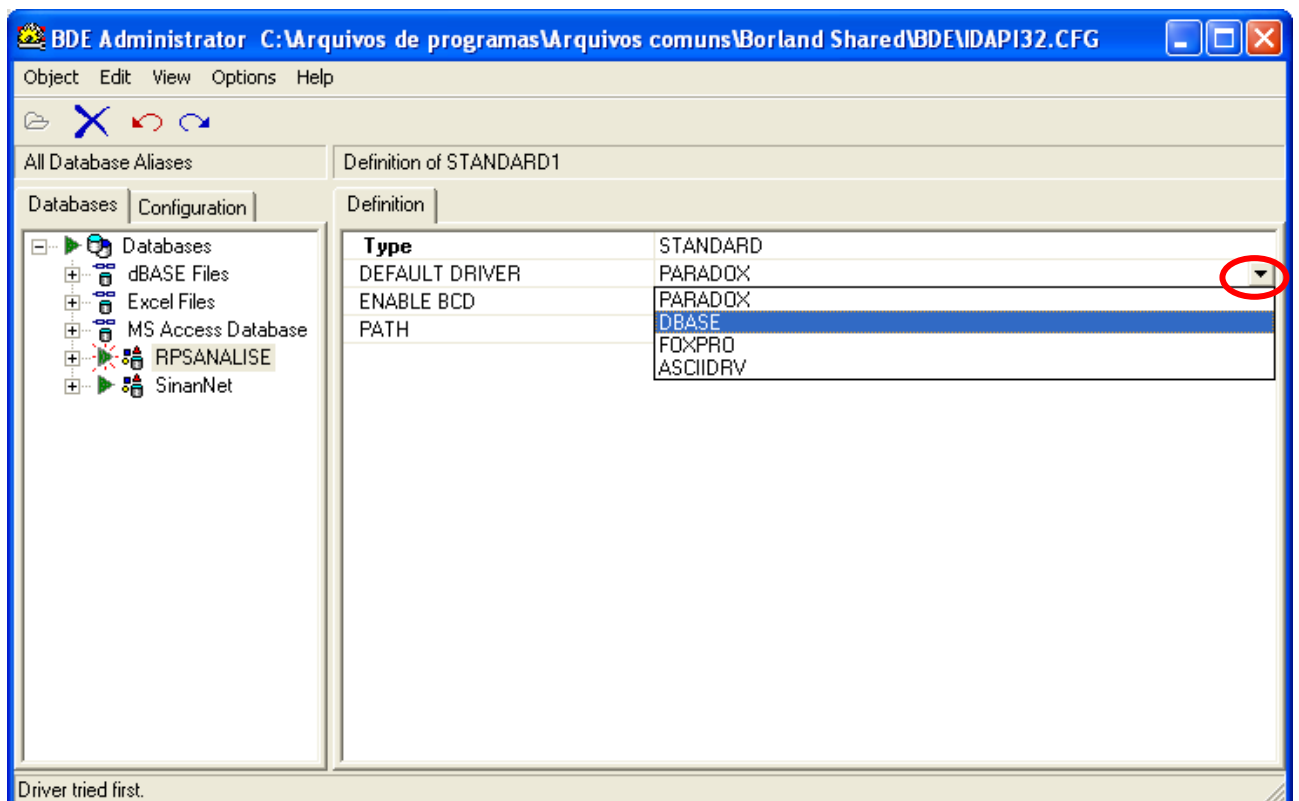

6. No lado direito da janela, clicar no botão com três pontos em PATH; (A)
7. Em DIRECTORIES, dar duplo clique em C → Duplo clique em SinanNet → Duplo clique em BaseDBF; (B)
8. Clicar no botão OK; (C)

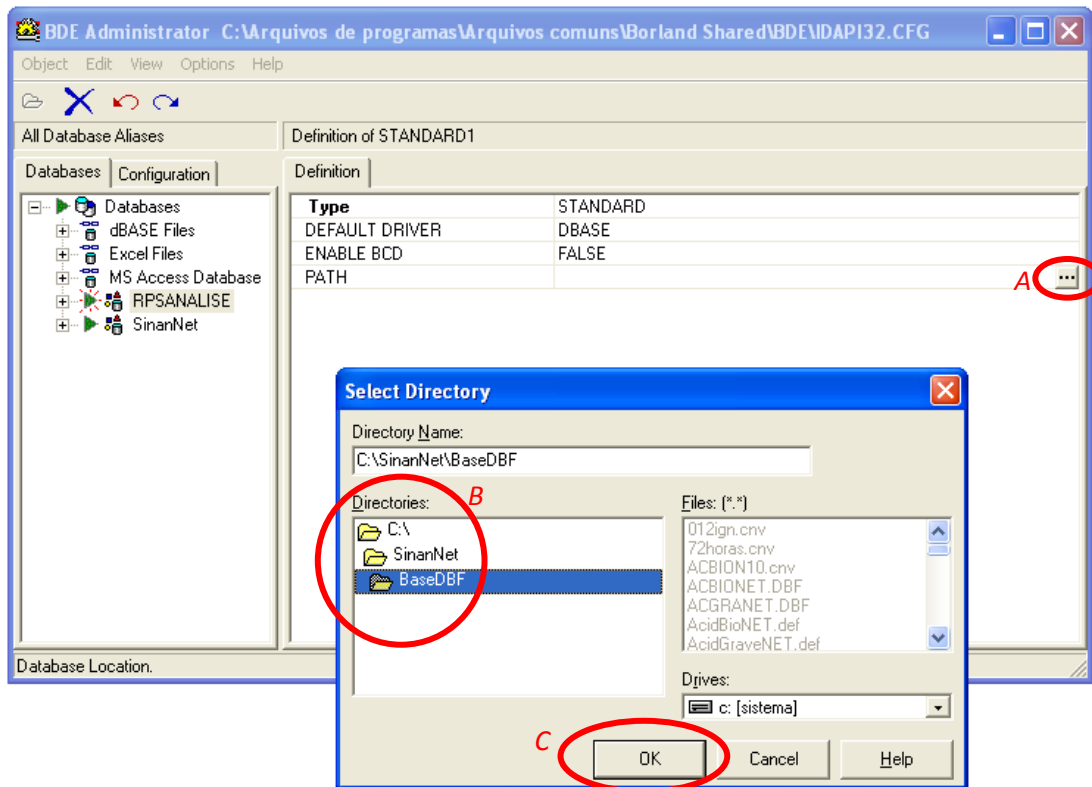

9. Clicar no menu OBJECT → APPLY para aplicar as configurações; (A)
10. Clicar no botão OK para salvar as alterações; (B)
11. Após salvar as alterações, fechar a janela para sair do BDE;

